



Pain Control  
Package Products



**MEDI HUB**

제품문의 ☎ 1899-7546

본 사 & 공 장 경기도 군포시 엘에스로 175, 108호, 201호 (산본동 SA타워)

T. 031-429-2939 / F. 0505-365-6126

Email : medihub@medihub.co.kr

Website : www.medihub.co.kr

**MEDI HUB**

# I-JECT ON

Digital Warmer & UV Sterilizer

의사와 환자를 위한 최적의 온도



휴온스

국소마취제  
시장점유율 1위 기업  
합작 개발품



◀ '아이젝 온' 소개 영상

I-JECT ON



음성안내  
살균을 시작합니다.(커버 닫을시)  
살균이 완료되었습니다.(살균종료시/3분)

전원 버튼 램프  
파란색  
녹색

인체 공학적 디자인  
최적의 사용자 편의성 제공


메탈시린지  
UV 살균 기능

Color Line up ● Gold ● Blue

## Turn On The New Warmth

새로운 따뜻함을 켜다

### Components

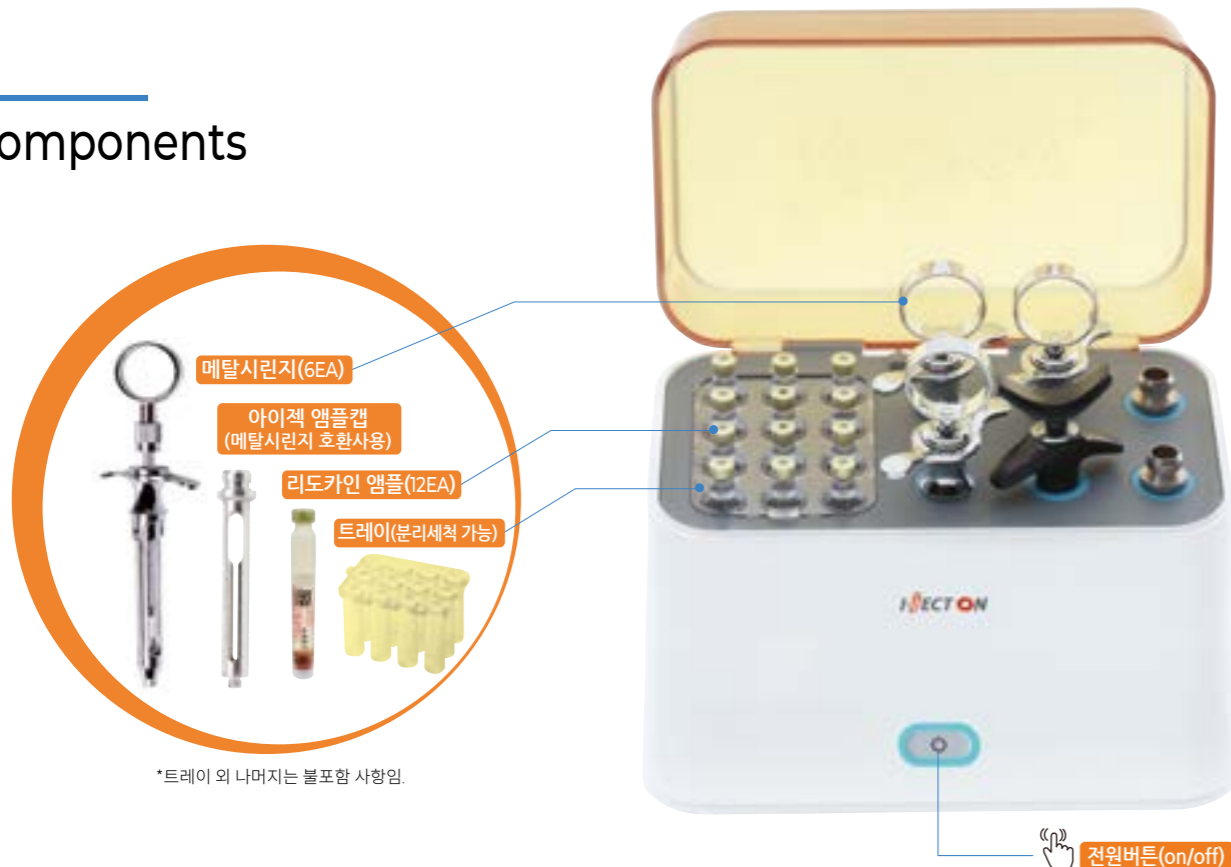

### Advantages



- 안전성** | 리도카인 변질 없는 안전한 온도 제어
- 디자인** | 인체공학적 디자인으로 최적의 사용 편의성 제공
- 만족도** | 리도카인 온도에 따른 마취시 콜드페인(Cold Pain) 해소
- 살균** | UV 살균 기능으로 세균 및 바이러스 99.9% 제거
- 음성안내** | 환자 안심감 제공 병원 홍보 효과 기대

### Specification

구분	항목	상세내용
기능	워밍 방식	Heating Panel
	워밍 온도(°C)	25~30°C
	워밍 시간	15~20분
	살균 방식	자외선 UV C-LED방식(5V)
	살균 동작조건	덮개 개방시 : 자외선 UV OFF 덮개 닫을시 : 자외선 UV ON(3분간 살균 후 자동 OFF)
크기	W × D × H (mm)	200 × 174 × 185 (mm)
온도	보관 온도	실온
인증	의료기기 허가	2등급(의료용 정원기, 자외선 소독기)